

Müller Geradschaft

Der klassisch zementierte Hüftschaft

DAS SYSTEM

Der Müller Geradschaft ist eine zementierte Hüftendoprothese, welche von Operateuren seit Jahrzehnten geschätzt wird. Er besitzt eine hohe Indikationsbreite und bietet die Möglichkeit einer individuellen Anpassung bei der Versorgung von Patienten höheren Alters. Der bewährte Hüftschaft verfügt über eine Rillenstruktur und ermöglicht somit eine gute Zementhaftung.

Der Müller Geradschaft ist aus einer CoCrMo-Gusslegierung hergestellt und für die Kombination mit Metall- sowie mit Keramik-Hüftköpfen geeignet.

TECHNISCHE MERKMALE

- ✓ Zementierter Hüftschaft
- ✓ CoCrMo-Gusslegierung (ISO 5832-4)
- ✓ CCD-Winkel 135° in Standard- und Lateral-Ausführung (optional) in jeweils 11 Größen
- ✓ Gute Zementanhaftung durch Rillenstruktur
- ✓ Einfaches Handling und Instrumentarium



Präoperative Planung


Zur präoperativen Planung stehen dem Operateur Röntgenschablonen des Müller Geradschaftes mit einer 15%igen Vergrößerung zur Verfügung. Damit ist es möglich:

- Die Resektionsebene zu bestimmen
- Die vorraussichtliche Implantatgröße festzulegen
- Das biomechanische Rotationszentrum zu rekonstruieren
- Die Größe und die Lage des Zementstoppers zu ermitteln

Indikationen

Der Müller Geradschaft besitzt eine hohe Indikationsbreite:

- Für fortgeschrittene Abnützung des Hüftgelenkes aufgrund degenerativer, posttraumatischer oder rheumatoider Arthritis
- Fraktur oder avaskuläre Nekrose des Femurkopfes
- Folgezustand früherer Operationen, z.B. Osteosynthese
- Gelenkrekonstruktion, Arthrodesse, Hemiarthroplastik oder Hüft-Total-Prothese

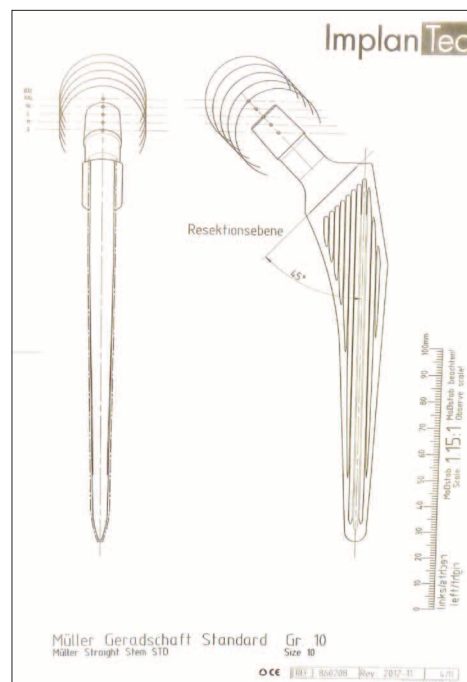

Röntgenschablone Müller Geradschaft Größe 10

IMPLANTATE

Müller Geradschaft Standard (CoCrMo)
CCD Winkel 135°

Art. Nr.	Größe
50506*	Müller Geradschaft 6,25
50507	Müller Geradschaft 7,5
50508	Müller Geradschaft 8,75
50510	Müller Geradschaft 10
50511	Müller Geradschaft 11,25
50512	Müller Geradschaft 12,5
50513	Müller Geradschaft 13,75
50515	Müller Geradschaft 15
50516	Müller Geradschaft 16,25
50517	Müller Geradschaft 17,5
50520*	Müller Geradschaft 20

* nur auf Anfrage erhältlich

Müller Geradschaft Lateral (CoCrMo)
CCD Winkel 135°

Auf Anfrage erhältlich!

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

- ✓ Operationstechnik (Lit. Nr. 860603)
- ✓ Reinigungsanleitung OHST
- ✓ Röntgenschablonen (Lit.Nr. 860208 (Standard) + 860209 (Lateral))

ImplanTec

Vertrieb in Österreich

ImplanTec GmbH

Grenzgasse 38a

2340 Mödling

OHST
medical technology

HERSTELLER

OHST Medizintechnik AG 0482

Grünauer Fenn 3

14712 Rathenow

Deutschland